

Laryngoskope

Die praxisgerechte Konstruktion der Laryngoskop-Familie sorgt für optimale Hygiene und zuverlässige Funktion in jeder Situation. Ihr ergonomisches Design gewährleistet eine problemlose Handhabung.



D-16232-2009

GROSSE VARIANTENVIELFALT

Die Laryngoskopfamilie von Dräger¹⁾ ist in einer Vielzahl von Größen und Varianten für Sie erhältlich: ob für Erwachsene oder für Kinder, sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegversionen. Dadurch steht Ihnen das passende Instrument für unterschiedlichste Patienten und Situationen zur Verfügung. Sie haben die Wahl zwischen fiberoptischen (F.O.) und konventionellen Modellen (WL), aber auch zwischen zahlreichen Macintosh und Miller-Spatelgrößen. Dabei können Sie zwischen zwei Batteriegriffgrößen wählen - je nachdem, welche Spatelvariante Sie bevorzugen. Die gesamte Produktpalette entspricht den internationalen Standards. Mit unseren Intubationshilfen sind Sie für verschiedenartigste medizinische Anwendungen und Notfallsituationen gerüstet.

EINFACHE HANDHABUNG UND DESINFEKTION

Dank des ergonomischen Designs der Spatel und Batteriegriffe lassen sich alle Laryngoskope einfach handhaben und bei der Intubation sicher anwenden. Die Spatel bieten eine enorme Stabilität bei

niedrigem Eigengewicht. Diesen Vorteil werden Sie und Ihre Patienten besonders in Notfallsituationen zu schätzen wissen. Die Mehrwegspatel sind darüber hinaus leicht zu reinigen, zu desinfizieren und bis zu 134° C autoklavierbar. Durch die einfache Steckverbindung der Spatel gibt es kaum Öffnungen, die verschmutzen könnten. Dies verhindert die Infektionsübertragung, ist hygienisch und sicher. Die ergonomische Form ohne Kanten und Ecken reduziert gleichzeitig die Verletzungsgefahr.

HOHE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Ob im OP oder bei einem Notfalleinsatz, jeder Handgriff muss sitzen. Anästhesisten und Notärzte brauchen Instrumente, auf die sie sich verlassen können. Die Laryngoskopfamilie von Dräger¹⁾ ist dafür der ideale Partner: moderne Technologie, hoher Qualitätsstandard – ob im Fiberoptik- oder Warmlicht-Bereich. Die Laryngoskope haben durch Ihre hohe Qualität bewiesen, dass Sie den unterschiedlichsten Anforderungen im klinischen und ausserklinischen Alltag dauerhaft gewachsen sind.



D-402-2010

Warmlicht (WL) Laryngoskop-Universalset



D-403-2010

Warmlicht (WL) Laryngoskop-Familie

INTELLIGENT UND UNIVERSAL

Zur Wiederaufladung von Fiber-Optik (F.O.) Laryngoskopen (2,5 V/3,5 V) und konventionellen (WL) Laryngoskopen (2,5 V) steht Ihnen die Universal-Ladestation MedCharge®²⁾ 3000 zur Verfügung.

Die intelligente Elektronik steuert den Spannungsverlauf der Ladebatterien während des Ladevorgangs. Eine Überladung der Ladebatterie wird somit vermieden, und die Lebensdauer des

einzelnen Akkus wird optimal ausgenutzt. MedCharge®²⁾ 3000 erkennt auch den Akku-Typ sowie dessen Ladezustand und stellt sich mit Hilfe des Micro-control-Systems individuell auf diesen Zustand ein.

Mit einem entsprechenden Adapter (auf Anfrage) können überdies auch die Laryngoskope anderer Hersteller problemlos aufgeladen werden.

¹⁾ Hersteller KIRCHNER&WILHELM, Asperg, Germany

²⁾ MedCharge® ist eine eintragende Marke von KIRCHNER&WILHELM, Asperg, Germany

BESTELLINFORMATIONEN

WARMLICHT (WL)-LARYNGOSKOPE

Spatel (Mehrweg), Maße in mm

Spatel (Mehrweg), Maße in mm	Bestellnr.
Spatel Gr. 0 (Mac), 77 x 13	MX03302
Spatel Gr. 1 (Mac), 92 x 18	MX03303
Spatel Gr. 2 (Mac), 112 x 20	MX03304
Spatel Gr. 3 (Mac), 133 x 21	MX03305
Spatel Gr. 4 (Mac), 153 x 21	MX03306
Spatel Gr. 0 (Miller), 79 x 10	MX03307
Spatel Gr. 1 (Miller), 103 x 10	MX03308
Spatel Gr. 2 (Miller), 153 x 12	MX03309

Sets im Koffer verpackt (Mehrweg)

Laryngoskopset Universal (Batteriegriff Erwachsene; Spatel Gr. 0 (Miller); Spatel Gr. 1 (Mac); Spatel Gr. 2 (Mac); Spatel Gr. 3 (Mac); Spatel Gr. 4 (Mac))	MX03300
Laryngoskopset Erwachsene (Batteriegriff Erwachsene; Spatel Gr. 2 (Mac); Spatel Gr. 3 (Mac); Spatel Gr. 4 (Mac))	MX03313
Laryngoskopset Pädiatrie (Batteriegriff Pädiatrie; Spatel Gr. 0 (Miller); Spatel Gr. 1 (Miller), Spatel Gr. 2 (Mac))	MX03312

Batteriegriffe

Batteriegriff, Erwachsene, 2,5 V, 28 mm Ø	MX03301
Batteriegriff, Pädiatrie, 2,5 V, 19 mm Ø	MX03314

Austausch- und Verschleißteile

Akku Erwachsene, 2,5 V	MX03327
Akku Pädiatrie, 2,5 V	MX03315
Vakuumlampe für Spatel (Gr. 0 – 1)	MX03316
Vakuumlampe für Spatel (Gr. 2 – 5)	MX03311



D-404-2010

Warmlicht (WL) Laryngoskop-Spatel nach Macintosh (MX03303)



D-405-2010

Warmlicht (WL) Laryngoskop-Spatel nach Miller (MX03307)



D-402-2010

Warmlicht (WL) Laryngoskop-Universalset (MX03300)



D-406-2010

Warmlicht (WL) Batteriegriff für Erwachsene (MX03301)



D-4585-2010

Akku für Erwachsenen-Laryngoskope (MX03327)



D-4583-2010

Warmlicht (WL) Vakuumlampe Gr. 0 bis 1 (MX03316)

BESTELLINFORMATIONEN

FIBER-OPTIK (F.O.)-LARYNGOSKOPE

Spatel (Mehrweg), Maße in mm	Bestellnr.
F.O.-Spatel Gr. 0 (Mac), 83 x 14	MX03319
F.O.-Spatel Gr. 1 (Mac), 93 x 14	MX03320
F.O.-Spatel Gr. 2 (Mac), 113 x 20	MX03321
F.O.-Spatel Gr. 3 (Mac), 133 x 20	MX03322
F.O.-Spatel Gr. 4 (Mac), 155 x 20	MX03323
F.O.-Spatel Gr. 00 (Miller), 65 x 11	MX50052
F.O.-Spatel Gr. 0 (Miller), 79 x 11	MX03324
F.O.-Spatel Gr. 1 (Miller), 103 x 11	MX03325
F.O.-Spatel Gr. 2 (Miller), 156 x 13	MX03326
F.O.-Spatel Gr. 3 (Miller), 193 x 13	MX50053
F.O.-Spatel Gr. 4 (Miller), 204 x 17	MX50054

Sets im Koffer verpackt (Mehrweg)

F.O.-Laryngoskopset Universal (F.O.-Batteriegriff Erwachsene; F.O.-Spatel Gr. 0 (Miller); F.O.-Spatel Gr. 1 (Mac); F.O.-Spatel Gr. 2 (Mac); F.O.-Spatel Gr. 3 (Mac); F.O.-Spatel Gr. 4 (Mac))	MX03317
F.O.-Laryngoskopset Erwachsene (F.O.-Batteriegriff Erwachsene; F.O.-Spatel Gr. 2 (Mac); F.O.-Spatel Gr. 3 (Mac); F.O.-Spatel Gr. 4 (Mac))	MX03330
F.O.-Laryngoskopset Pädiatrie (Batteriegriff Pädiatrie; F.O.-Spatel Gr. 0 (Miller); F.O.-Spatel Gr. 1 (Miller)); F.O.-Spatel Gr. 2 (Mac))	MX03329

Spatel (Einweg)

Spatel Gr. 2 (Mac), 20 Stück	MP01600
Spatel Gr. 3 (Mac), 20 Stück	MP01601
Spatel Gr. 4 (Mac), 20 Stück	MP01602
Spatel Gr. 0 (Miller), 20 Stück	MP01603
Spatel Gr. 1 (Miller), 20 Stück	MP01604
Spatel Gr. 2 (Miller), 20 Stück	MP01604
Spatel Gr. 3 (Miller), 20 Stück	MP01605

Wichtig: Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Sprachen der Gebrauchsanweisung besteht eine Marktfreigabe für die Einwegspatel nur für Länder, mit folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Russisch bzw. für Länder, in denen keine spezielle Länderzulassung notwendig ist.

Batteriegriffe

Batteriegriffe	Bestellnr.
F.O.-Batteriegriff, Erwachsene, 2,5 V, 28 mm Ø	MX03318
F.O.-Batteriegriff; Pädiatrie, 2,5 V, 19 mm Ø	MX03331

Austausch- und Verschleißteile

Xenon-Lampen für Batteriegriff, 2,5 V	MX03328
Akku Erwachsene, 2,5 V	MX03327
Akku Pädiatrie, 2,5 V	MX03315


Universal-Ladestationen

Ladestation MedCharge 3000 "EU" (EU-Version)	MX50028
Ladestation MedCharge 3000 "GB" (GB-Version)	MX50029



D-407-2010

Fiber-Optik (F.O.) Laryngoskop-Spatel nach Macintosh (MX03320) mit integrierter F.O.

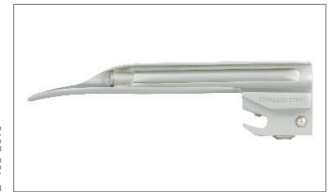

D-408-2010

Fiber-Optik (F.O.) Laryngoskop-Spatel nach Miller (MX03326)



D-408-2010

Einweg Fiber-Optik (F.O.) Laryngoskop-Spatel nach Macintosh (MP01602)



D-410-2010

Fiber-Optik (F.O.) Batteriegriff für Erwachsene (MX03318)



D-36566-2009

Universal-Ladestationen (MX50028) Netzstecker gemäß DIN 49441/DIN 49441, A2.



D-36587-2009

Universal-Ladestationen (MX50029) Netzstecker gemäß British Standard 1363.

HAUPTSITZ

Dräger Medical AG & Co. KG
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com

* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 16 09 04-0
Fax +43 16 99 45 97
business-support.austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

KaWe
KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg
Deutschland